

Let's get started.

Kit includes:

This Kit includes **two (2)** collections. **Do not open the collection bags until indicated in the steps below.** Please be prepared to ship **Collection 1** and **Collection 2** to the laboratory for processing within 24 hours of collection.



Collection overview



Specimen confirmation form



FedEx envelope (located at the bottom of the kit)



Collection 1



Collection 2

1

You do not need to fast prior to your collections. You can eat and drink as normal.

2



When you are ready to begin the collection process, open only the blue bag marked Collection 1. Follow the instructions inside the blue bag for Collection 1.

3



Once you have completed Collection 1, open only the yellow bag marked "Collection 2" and follow the instructions inside the bag for Collection 2.

4



Once you have completed Collection 2, follow the instructions inside the bag for Collection 2 to prepare both collections for shipment. You will need the specimen confirmation form and the FedEx envelope. Please refer to back of this page for shipping instructions.



Return Shipping Instructions

Your package containing the specimens from both collections is to be mailed back to Labcorp via **FedEx** in the prepaid FedEx mailer included in your kit. **Do not** place your specimen in your USPS mailbox. **It's important to ship your specimen to Labcorp within 24 hours of collection.**

Option 1 FedEx Drop Box



You can drop off in a FedEx drop box.
Visit <https://bit.ly/fedexdropbox>
or **scan QR code** to view FedEx drop box pickup schedules.

Option 2 Schedule a FedEx Pickup

Call FedEx at 800-463-3339 and answer some questions.

FedEx: "What are you calling about?"

You: "FedEx Express return pickup."

FedEx: "...a pickup for today or tomorrow, depending on availability, say 'pickup.'"

You: "Pickup."

FedEx: "Is the word "stamp" written anywhere on your return label?"

You: "No."

FedEx: "What is the tracking number?"

You: Provide the tracking number (TRK#) from the return label.

FedEx: "What kind of return are you calling about?"

You: "FedEx Express." Provide additional information as requested. You may be asked for the pickup location address, number of packages to be picked up, day and time window for the pickup, or if your shipment is currently ready.

Note the confirmation pickup number provided.

If you are asked for a credit card or account number, state that this is a FedEx Express return pickup and provide the tracking number (TRK#) from the return label.

ORIGIN ID: GSXA (423) 423-4234	SHIP DATE: 11FEB21 ACTWGT: 1.00 LB CAD: 114076797/WVSX3200
RONNY ROY 3061 S CHURCH ST BURLINGTON, NC 27215 UNITED STATES US	
TO ATTENTION: LABCORP, DIRECT TEST DEP LABCORP 1447 YORK CT **TEST LABEL - DO NOT SHIP** BURLINGTON NC 27300	
INV: (336) 436-7597	REF: DEPT:
RMA:	
	
RETURNS MON-SAT PRIORITY OVERNIGHT	
27300	
NC-US	
	

TRK# 7954 9902 9704

Empecemos.

El kit incluye:

Este kit incluye **dos (2)** recolecciones. **No abra las bolsas de recolección hasta que se le indique en los pasos a continuación.** Tenga todo listo para enviar la **recolección 1** y la **recolección 2** al laboratorio para su procesamiento en el plazo de las 24 horas de la recolección.



Información general
de la recolección




Formulario de
confirmación de
la muestra



Sobre de FedEx
(ubicado en la parte
inferior del kit)



Recolección 1

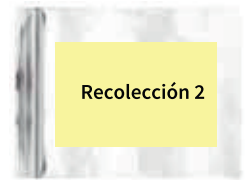

Recolección 2



Recolección 1


1

No es necesario que ayune antes de las recolecciones. Puede comer y beber normalmente.

2

Cuando esté listo para comenzar con el proceso de recolección, abra únicamente la bolsa azul marcada como recolección 1. Siga las instrucciones dentro de la bolsa azul para la recolección 1.

3

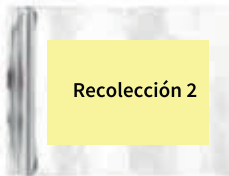

Recolección 2

Una vez que haya completado la recolección 1, abra únicamente la bolsa amarilla marcada como "Recolección 2" y siga las instrucciones dentro de la bolsa para la recolección 2.

4



Una vez que haya completado la recolección 2, siga las instrucciones dentro de la bolsa para recolección 2 para preparar ambas recolecciones para el envío.

Necesitará el formulario de confirmación de la muestra y el sobre de FedEx. Consulte el reverso de esta página para obtener instrucciones de envío.



Instrucciones de envío para devoluciones

Su paquete que contiene las muestras de ambas recolecciones debe enviarse de vuelta a Labcorp a través de **FedEx** en el sobre prepagado de FedEx incluido en su kit. **No** coloque su muestra en su buzón de correo de USPS. **Es importante que envíe su muestra a Labcorp en el plazo de las 24 horas de la recolección.**

Opción 1 Buzón de FedEx



Puede dejar la recolección en un buzón de FedEx.

Visite <https://bit.ly/fedexdropbox>

o **escanee el código QR** para ver los cronogramas de recolección de los buzones de FedEx.

Opción 2 Programar una recolección con FedEx

Llame a FedEx al 800-463-3339 y responda algunas preguntas.

FedEx: “¿Por qué llama?”

Usted: “Recolección para devolución de FedEx Express”.

FedEx: “...para concertar una recolección para hoy o mañana, según la disponibilidad, diga 'recolección'”.

Usted: “Recolección”

FedEx: “¿Está escrita la palabra “sello” en alguna parte de la etiqueta de devolución?”

Usted: “No”

FedEx: “¿Cuál es el número de seguimiento?”

Usted: Proporcione el número de seguimiento (TRK#) de la etiqueta de devolución.

FedEx: “¿Respecto a qué tipo de devolución está llamando?”

Usted: “FedEx Express” Proporcione información adicional según se solicite. Es posible que se le pida la dirección del lugar de recolección, la cantidad de paquetes que se deben recoger, el día y la hora de la

Anote el número de confirmación de recolección proporcionado.

Si le piden una tarjeta de crédito o un número de cuenta, indique que se trata de una recolección de devolución de FedEx Express y proporcione el número de seguimiento (TRK#) de la etiqueta de devolución.

ORIGIN ID:GSXA (423) 423-4234 SHIP DATE: 11FEB21
RONNY ROY ACTWGT: 1.00 LB
3061 S CHURCH ST CAD: 114076797/WVSX3200
BURLINGTON, NC 27215
UNITED STATES US
TO ATTENTION: LABCORP, DIRECT TEST DEP
LABCORP
1447 YORK CT
TEST LABEL - DO NOT SHIP
BURLINGTON NC 27300
(336) 436-7597 REF:
INV. PO. DEPT:
RMA:
FedEx Express
E
RETURNS MON-SAT
PRIORITY OVERNIGHT
27300
NC-US